



Полноразмерная матрица 15 x ø 20
без «сшивки»

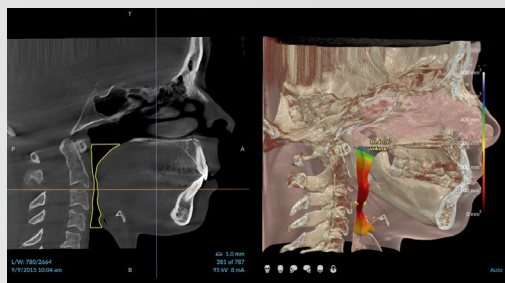

Анатомически корректные
зоны сканирования

Высокое качество изображения
благодаря уникальному **фильтру**
визуализации имплантатов **ICE**

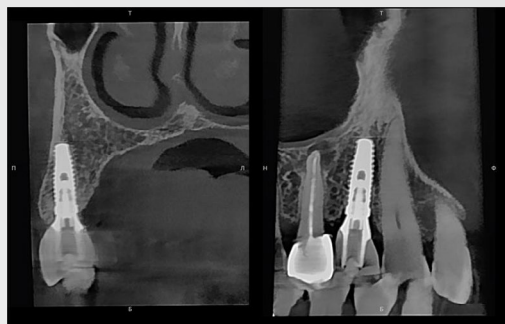

Инновационное ПО с технологией
AI для просмотра КТ, диагностики
и планирования шаблонов
DTX Studio Clinic в комплекте

Оставить заявку
на консультацию




Томограф OP 3D LX

Зона сканирования
(высота x диаметр)

Анатомическая область
и клиническое применение


5 x Ø 5

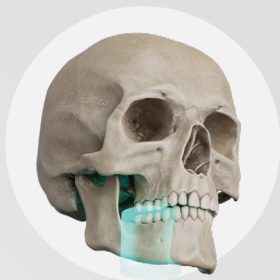

Локализованная область (3 - 5 зубов)

Высокоточная эндодонтическая оценка,
планирование одиночных имплантатов

6 x Ø 9

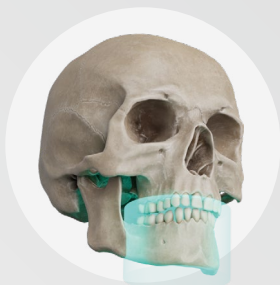

Зубной ряд одной челюсти

Планирование имплантации, хирургических шаблонов
и оценка ретинированных клыков


8 x Ø 8



Малая зубо-альвеолярная область

Планирование лечения и имплантации на обеих челюстях


10 x Ø 10

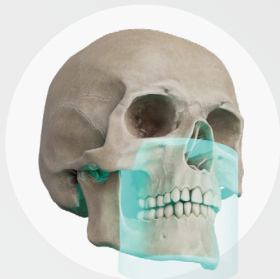

Полная зубо-альвеолярная область

Планирование лечения с захватом нижней части гайморовых
(верхнечелюстных) пазух, области третьих моляров –
оптимально для любых амбулаторных вмешательств


12 x Ø 15

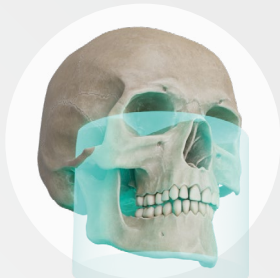

Зубочелюстная область

Оценка нижней, верхней челюсти, области ВНЧС,
верхнечелюстных пазух и верхних дыхательных путей

15 x Ø 20

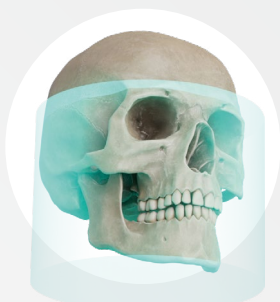

Челюстно-лицевая область

Оценка всего челюстно-лицевого комплекса (лицевого скелета),
включая верхнюю и нижнюю челюсти, ВНЧС, дыхательные пути,
остиомеатальный комплекс и придаточные пазухи носа,
профиль мягких тканей